

スマート ネックマッサージャー

取扱説明書




この度は本製品をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、

正しくご使用ください。

なお、お読みになられたあとも、大切に保管してください。

各部の名前

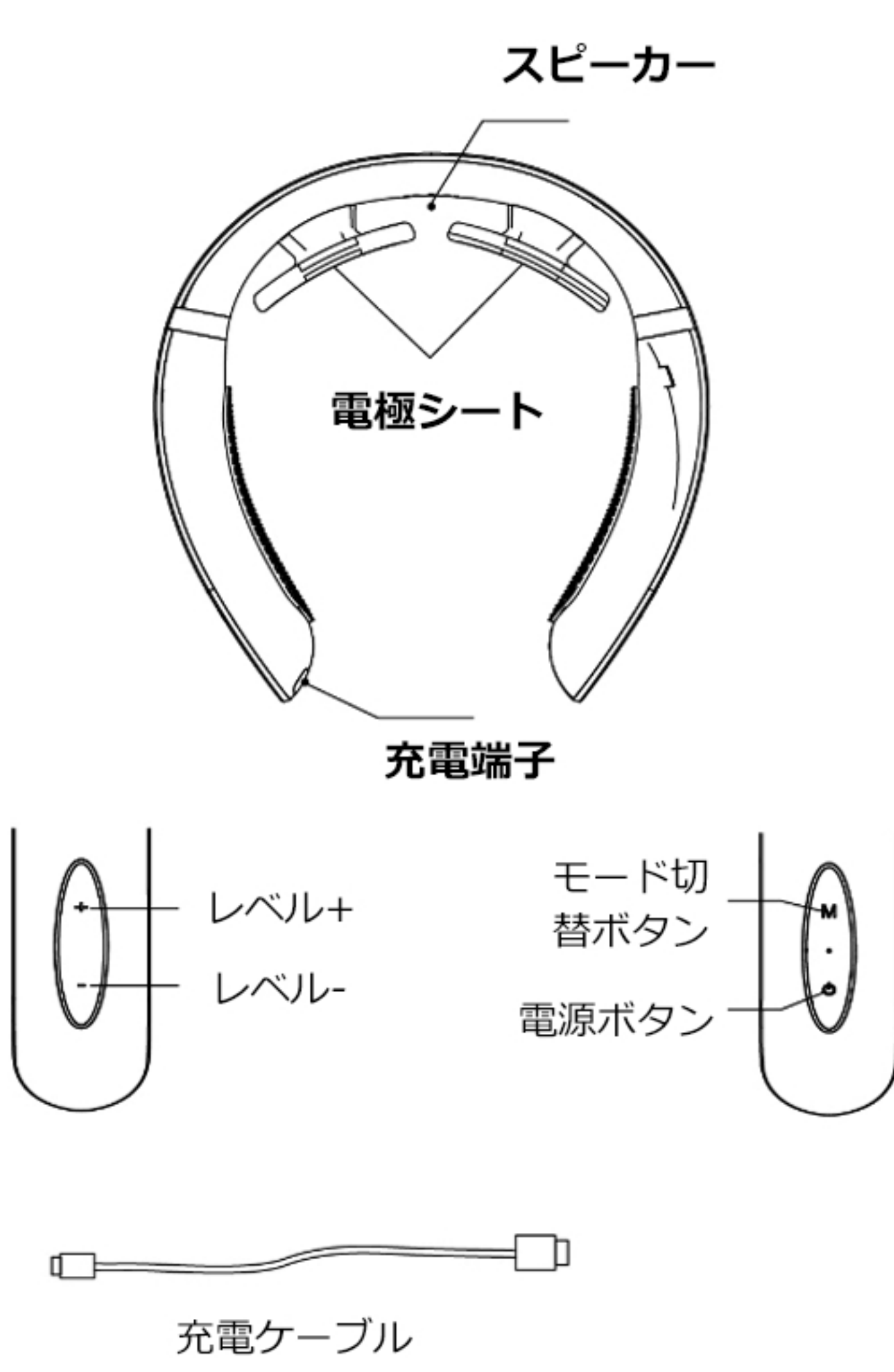

使い方

1、使用の際に

首に保湿クリームを塗ってからネックマッサージャーを使用することをおすすめします。電極シートを首にしっかりと当て、電源オンにして、好みの強さレベルとモードを調整します。

2、電源オン

電源ボタンを2秒長押しをして、スピーカーから「ピッ」という音がして、表示ランプが点灯し、電源オンになります。デフォルト設定はレベル1となります。

3、モード調整ボタン

電源オンの状態に、右側の「M」ボタンを押して6つのモードを選択できます。1回押すごとに、「ディ」の音が1回聞こえ、モードレベルが1つ上がり、6つのモードに順次に切り替えます。毎回モードを切り替えた場合、強さレベルが1段階になります。電源をオンにする時、モード1

(自動組み合わせモード)を默認します。マッサージモードは

以下のように6つあります。

モード1：自動組み合わせモード

モード2：鍼灸モード

モード3：マッサージモード

モード4：指圧モード

モード5：揉みモード

モード6：叩きモード

自動組み合わせモードは2、3、4、5、6モードに自動的に切り替える

モードです。自動組み合わせモードをおすすめします。

4、強さレベル選択ボタン

電源オンの状態に、左側の「+」ボタンは強さを上げることができます。

1回押すごとに、「ディ」の音が1回聞こえて、強さレベルが1つ上がります。

強さレベルは9段階(0、1、2、...、9)があります。

強さレベル9段階に「+」ボタンを押した場合、「ディ」の音が聞こえなく、

強さが変わらなく、また9段階であります。

使い方

5、レベル-

電源オンの状態で本製品左側の「-」ボタンを押すたびにピッという音が鳴り、

強さレベルが1段階ずつ下がります。8段階に分けられます

(備考：8、7、...、2、1)。強さレベルが1レベルになる

場合は「-」ボタンを押しても、ブザーは鳴らずレベルも変わりません。

6、ヒーターモード

電源オンの状態で本製品右側の「H」ボタンを短く押すと、ブザー音が鳴り、

ヒーターモードに入ります。2枚のヒーターが発熱し始め、

37~42℃の間で温度が安定します。もう一度押すと、

ヒーターモードがオフになります。